

●鍼灸接骨院 ●医療機関 ●プロフェッショナル専用

OXYRIUM medical1.5

酸素カプセル オキシリウム メディカル 1.5



メーカー希望小売価格


4,730,000 円(税込)～ ▶ お問合せ下さい。

純国産品

登録商標「OXYRIUM」・PL保険加入製品  
※スマートドアはオプションです。


### 導入後3年以上のオーナー様・お客様「不満・改善アンケート結果」

#### オーナー様のアンケート結果

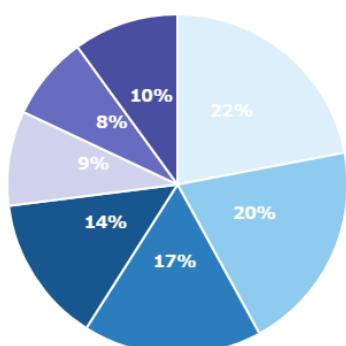

- 22% 稼動音・キシミ音がうるさい
- 20% 1.3以上に気圧を上げたい
- 17% カプセル内の酸素濃度を上げたい
- 14% カプセル内が暑い
- 9% 耳抜き・クレームが心配
- 8% エア漏れ・ボディ歪みのトラブル
- 10% その他

#### お客様のアンケート結果

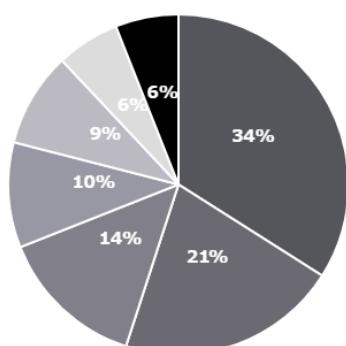

- 34% 1.3気圧以上に気圧を上げて欲しい
- 21% カプセル内の酸素濃度を上げたい
- 14% カプセル内が暑い
- 10% 長時間使いたい(1時間以上)
- 9% 稼動音・キシミ音がうるさい
- 6% 利用料金が高い
- 6% その他

【アンケート集計内容】

実店舗：114件、WEBリサーチ：763件、展示会アンケート：358件 合計1,235件中

導入後3年以上の運営している店舗様と継続利用しているお客様 合計531件の結果です。

導入後3年以上のオーナー様ご意見では、稼働音・キシミ音等の「騒音」が僅差でトップ。以前のアンケートでは少数意見であった「1.3以上の気圧」、「高酸素濃度」が上位にランクイン。オーナー様のご意見にはお客様からのご要望も反映されてはいるが、継続的

ご利用しているお客様のご意見では一般的酸素カプセルアンケートと大きく違い「1.3以上の気圧」「高酸素濃度」が55%と上位を占め、利用料金や耳抜きの不安等に関してのご意見は少なかった。

#### 【気圧に関してのオーナー様のご意見】

- ・一般店に導入されている1.3気圧の酸素カプセルとの差別化を図りたい
- ・継続的な利用による気圧の慣れやユーザーの目的に応じた高気圧対応
- ・1.3よりも高気圧・高濃度酸素でより効果的に結果を出したい

特に「1.3気圧以上の高気圧」に関しては、専門職の強い接骨院・鍼灸院・医療機関やアスリートからのご意見が多数を占めました。ハード型酸素カプセルを3年以上利用し初めて分かったオーナー様のご意見・ご要望をフィードバックし開発されました。

「OXYRIUM Medical 1.5」は、業界初の1.5気圧・静音40dBクラスを実現した鍼灸接骨院・医療機関・プロフェッショナル専用のハイスペックモデルです。



## 期待できる効果

深い眠り

効率良く酸素吸収

疲労回復

乳酸の分解

レオロジー効果

新陳代謝促進

コンディショニング

リラクゼーション

## 高気圧・高濃度酸素



酸素カプセルの「ヘンリーの法則=液体に溶解する気体の量は、気圧に比例して増加する」理論から、より酸素を増加させるために一般的な業務用酸素カプセル1.3気圧/30kPaより0.2気圧高めた **1.5気圧/50kPaの高気圧を実現しました。**

酸素分圧を上げ 「溶解型酸素」 を通常の3倍以上に増やします。高気圧環境であるカプセル内で高濃度酸素を吸入することにより 「結合型酸素」 も増やします。

また、身体全体を均一に1.5気圧/50kPaで高加圧することにより骨格や筋肉のバランスを整え本来の形に戻す 「レオロジー効果」 を目的としたプロフェッショナル専用 高気圧・高濃度・酸素カプセルです。

## ポイント

1. 高耐圧対応の一体型ハードカプセル  
**優れた耐久性**
2. 水深5~6m相当の高加圧  
**全身均一にMAX1.5気圧**
3. 高加圧で酸素分圧を上げる  
**酸素濃度 30~35%**



※1.5気圧以上は活性酸素・酸素毒性がみられる可能性がある為、安全気圧1.5気圧(1.6気圧未満)で設定しています。

## ポイント

1. 静かな酸素カプセル  
**40dB台の静音性※**
2. いつもクリーン給排気機能  
**安心の常時換気**
3. 国内一貫体制でコストカット  
**低価格を実現**




KMC  
KINETIC MEDICAL

KMC  
KINETIC MEDICAL


※40dBクラスとはささやき声、小雨の音、夜の住宅街の静けさ～

## 高気圧が「溶解型酸素」を増やす

体に取り込まれる酸素には、大きく2種類あります。

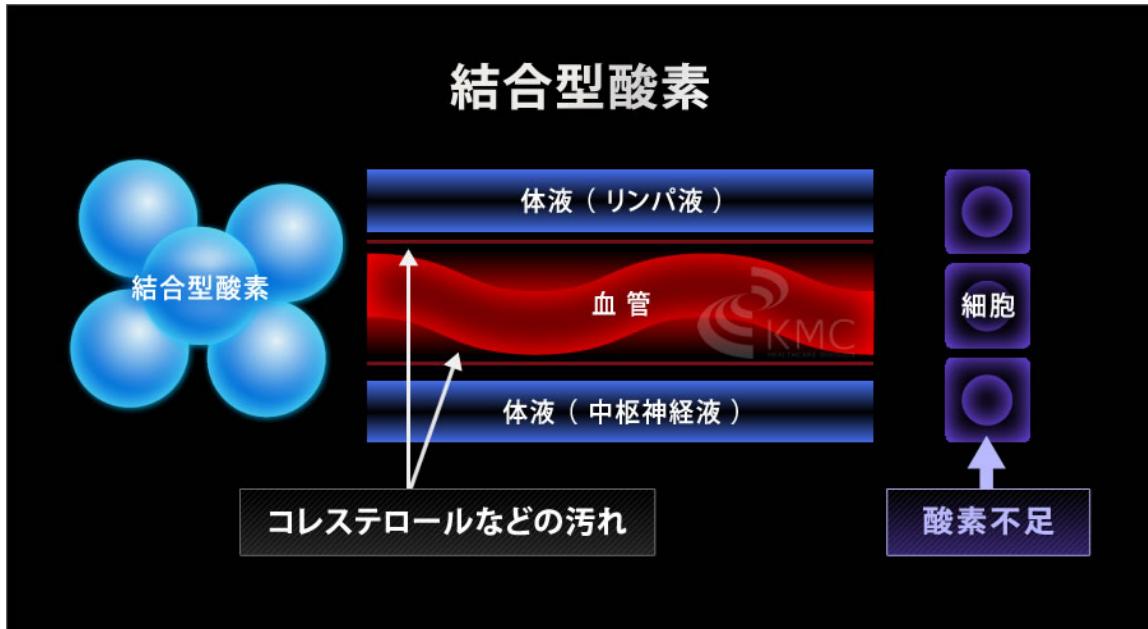

通常の呼吸や酸素発生器などで取り込み可能な酸素。血中のヘモグロビンと「結合」し体内に運ばれる酸素。サイズが大きく毛細血管を通り難くヘモグロビンの量より多く運ぶことが出来ません。現代は、ストレスや酸素濃度低下、肺機能低下により酸素不足になりがちです。

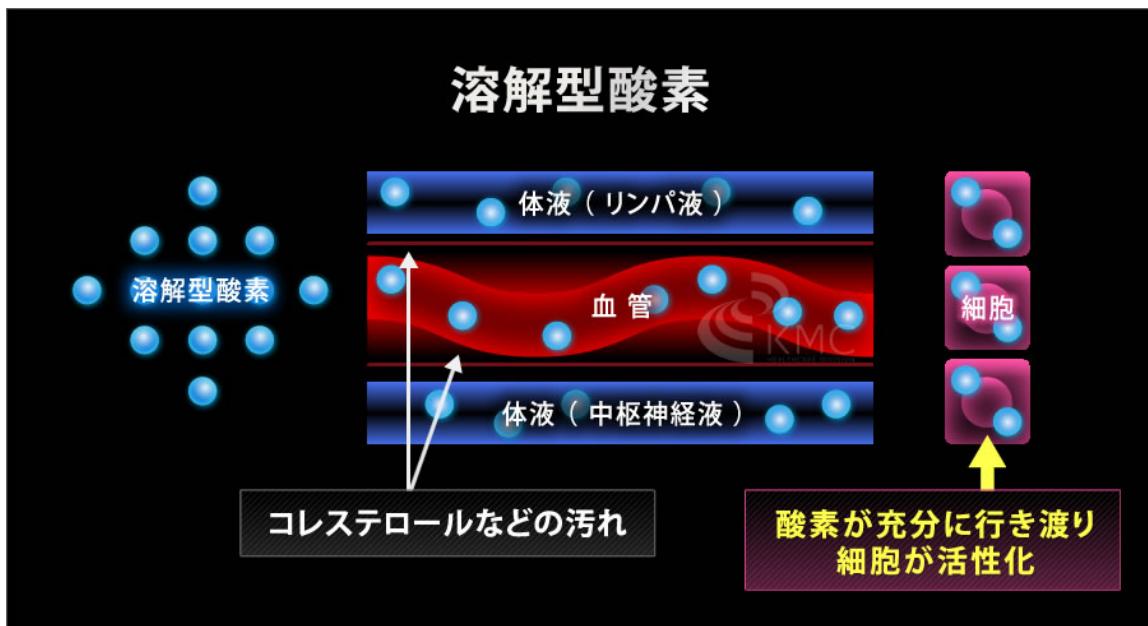

高気圧環境でより多く取り込み可能な酸素。血液や体液に溶け込むサイズの小さい（5ミクロン）酸素。毛細血管を通り易く結合型酸素と比べ極少量しか存在しません。通常の呼吸や酸素吸入だけでは溶解型酸素を増やすことは難しいのです。

溶解型酸素「気圧に比例」して増える



「ヘンリーの法則=液体に溶解する気体の量は気圧に比例して増える」の理論を応用して開発されたのが高気圧酸素カプセルです。カプセル内の気圧が高ければ高いほど酸素分圧が上がり、溶解型酸素を増やします。一般的に酸素カプセルの内部気圧は、家庭用（1.1～1.2気圧）業務用（1.2～1.3気圧）です。

OXYRIUM Medical1.5は、1.2・1.3・1.4・1.5（気圧）の4段階に切り替え設定が可能で初心者からヘビーユーザー、アスリートまで満足して頂けるプロフェッショナル専用のハイスペックモデルです。

※1.5気圧から活性酸素・酸素毒性がみられる可能性がある為、安全気圧1.5気圧(1.6気圧未満)で設定しています。

## OXYRIUM Medical1.5 の特長

### 店舗事情を考慮した省スペース設計

店舗やご自宅に設置される場合、スペース確保が難しい場合が少なくありません。制御装置とカプセル本体を一体化することにより無駄な配線が無く省スペースを実現しました。限られたスペースを有効活用出来ます。



## クラス最高の静音性能

自動車製造工学を最大限に応用した「マフラー構造」により給気口・排気口を徹底的に静音化。給気ホースをカプセルと直結せず、ポンプとカプセル本体の間に車の消音マフラーと同様の原理で開発した「給排気消音マフラーシステム」を採用しました。給気口・排気口に静音・防音・振動対策を施しノイズの吸収率とアルミBOXの密閉率を向上させました。給気・排気の騒音を解決し「約40dBクラスの静寂な高気圧空間」を実現しています。

※40dBクラスとはささやき声、小雨の音、夜の住宅街の静けさ～



## medical専用の高加圧ポンプシステム


心臓部にオイルレス日立製コンプレッサーを採用し  
大型1500Wクラス並みのパワーで高圧縮しスムーズに高加圧。

酸素カプセルは内部の気圧が高ければ高いほど高圧縮能力が問われます。ハイスペックモデルであるmedical専用に開発した高加圧ポンプシステムは、温度上昇と振動・騒音対策を徹底的に施し、消費電力を約600Wに抑えながらのパワフルでスムーズな高圧縮・高加圧を実現しました。



## 5エアクリーン & 消音システム

室内から外気を取り入れカプセル内に入るまで

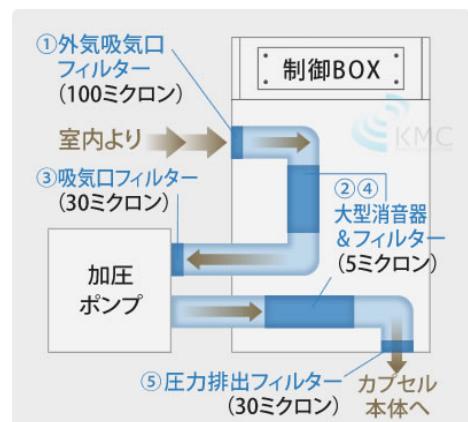

5箇所に高性能／集塵・フィルターを通し常にカプセル内をクリーンに保ちます。また、車のマフラーと同様の原理で開発した消音システムにより高度な静寂空間を実現しました。

# 7つの安全対策セーフティ設計

ドア開閉をモニタリングし異常を感知した場合に強制作動するドアクローズセンサー。カプセル内を常に換気しクリーンに保つ常時排気バルブを配置。漏電が発生した場合、ブレーカーが作動し漏電火災を防ぐ強制遮断装置。異常気圧上昇を防ぎ常に安定した気圧へコントロールする気圧上昇防止機能。何らかの問題が発生し気圧上昇防止機能で制御できなかった場合は、気圧過昇リリーフバルブが自動で作動します。

また緊急時排気弁をカプセル外部と内部の2か所に配置し安全対策は万全です。

1. 利用者様の安全なドアの開閉をモニタリングする **ドアクローズセンサー**

2. 外から緊急時に強制的（約1分）に気圧を下げる **手動式強制排気弁**


3. 内から緊急時に強制的（約1分）に気圧を下げる **手動式強制排気弁**

4. 過昇気圧を防ぎ安定した気圧へコントロールする **気圧上昇防止機能**

5. 気圧に異常を検知した場合、強制排気させる **気圧過昇リリーフバルブ**


6. 二酸化炭素上昇を抑えカプセル内をクリーンに保つ **常時排気バルブ**

7. 漏電が発生した場合にブレーカーが作動して火災を防ぐ **強制遮断装置**

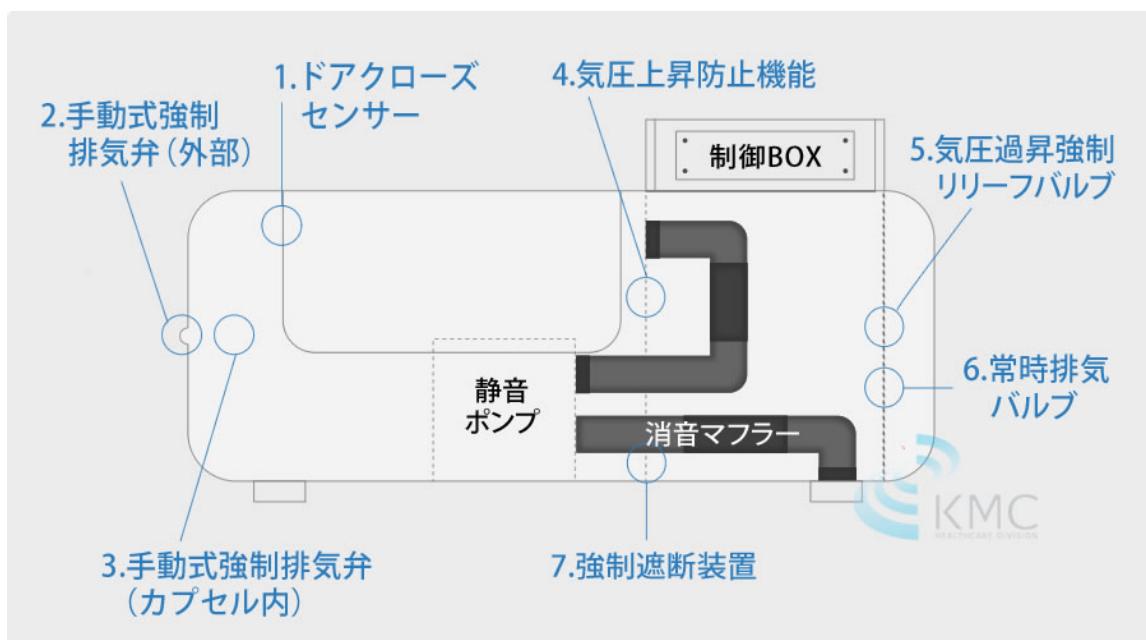


## 常時換気&加圧減圧プログラム

数百に及ぶ加圧・減圧パターンを検証し圧力をロスしない「常時排気」と「鼓膜に負担の少ない」安心プログラムを採用しました。通常の生活気圧1.0気圧から指定気圧まで加圧して行く段階で給気（加圧）のみの場合は、カプセル内で人が吐き出す二酸化炭素（CO<sub>2</sub>）が増え続けてしまいます。カプセル内部のCO<sub>2</sub>を含んだ空気を常に排出し、新鮮な空気を取り入れる「排気しながら加圧する常時排気」を採用しています。常時排気と加圧減圧プログラムにより「利用者の鼓膜への負担を抑え、カプセル内のCO<sub>2</sub>濃度上昇を抑制」します。快適で常にクリーンな高加圧環境を維持し、鼓膜の違和感や寝苦しさも解消します。

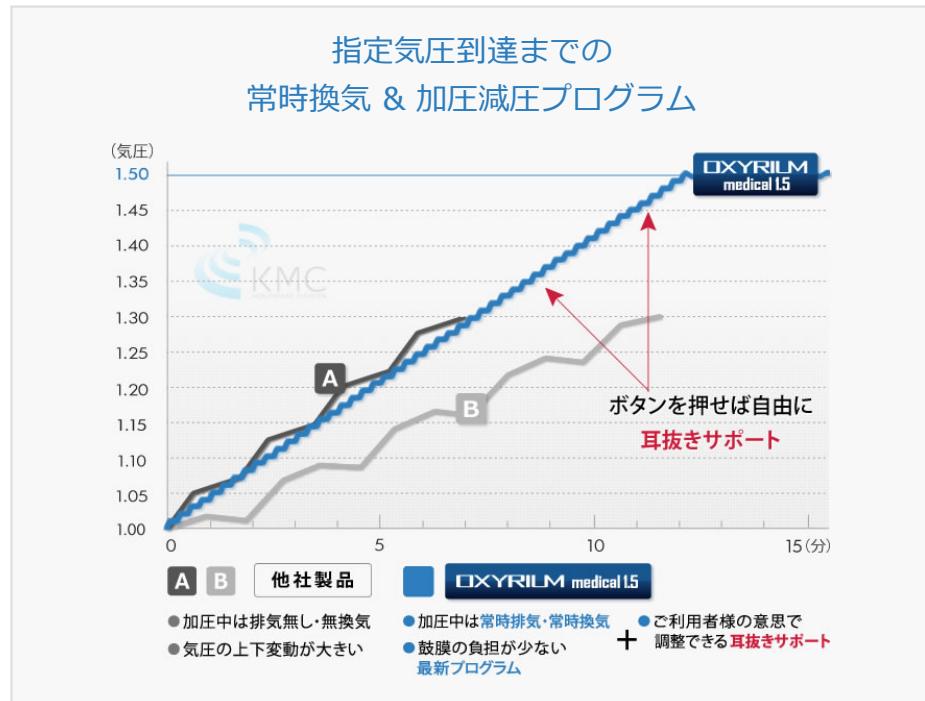

加圧時の場合、「耳抜きが出来ないその時」にすぐ減圧し「耳抜する前の気圧」に少しづつ戻し、耳抜きがし易い状態をボタン一つで操作出来る「耳抜きサポート機能」を追加。「鼓膜に負担の少ない加圧・減圧プログラム+耳抜きサポート機能」で耳抜きの苦手な方も安心してご利用頂けます。

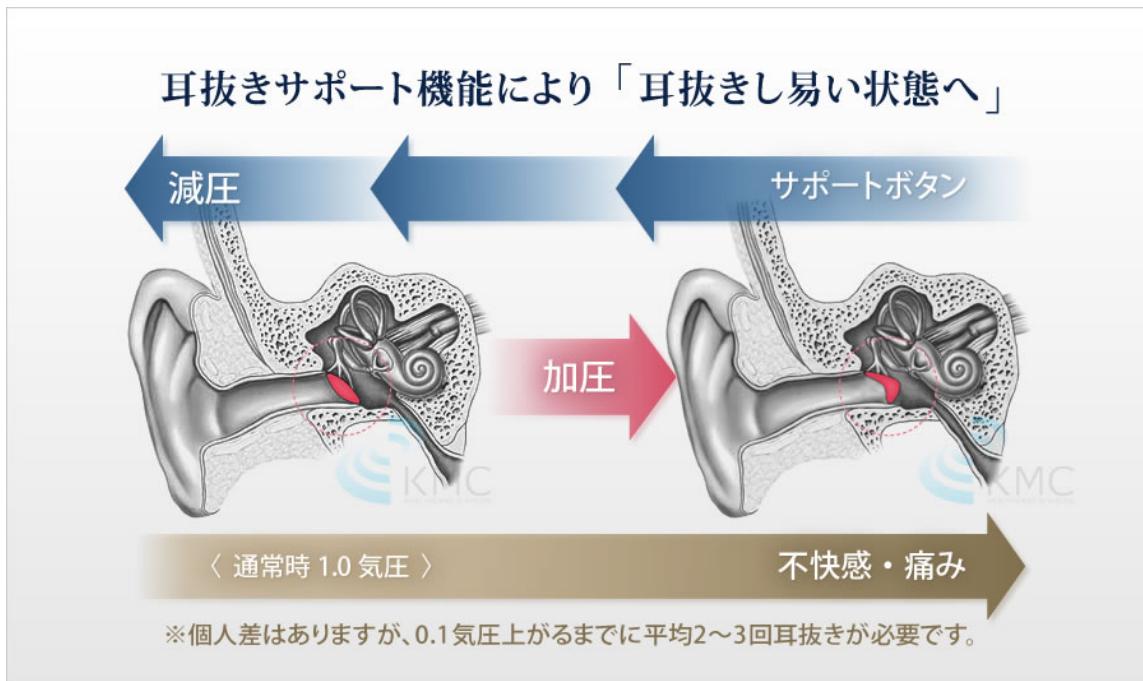


## 気圧安定システム

指定気圧へ到達後もカプセル内部の圧縮されたCO<sub>2</sub>を含んだ空気を排出し、新鮮な酸素を取り入れる為、常に加圧・減圧を繰り返す「常時換気」をしています。しかし、加圧・減圧の差が大きいとカプセル内の気圧の上下「気圧変動」が大きくなり「利用者様は、耳・鼓膜に痛みや普段は体感しない気圧の違和感を感じリラックス出来ません」。

従来型の酸素カプセルは、指定気圧を保つ為に「加圧(給気)→減圧(排気)→加圧(給気)」を繰り返します。指定気圧1.3気圧の場合「1.3気圧まで加圧(給気)し1.3気圧を超えると減圧(排気)」すると1.3気圧を起点とし、気圧が上下する「気圧変動」が大きくなります。

OXYRIUM Medical1.5の気圧安定システムは「常時換気しながら加圧(給気)と減圧(排気)を限りなく同時にを行い、気圧変動差をゼロ」に近づけました。カプセル内に安定した高加圧環境をつくり出し、静かにゆったりとお寛ぎ頂けます。

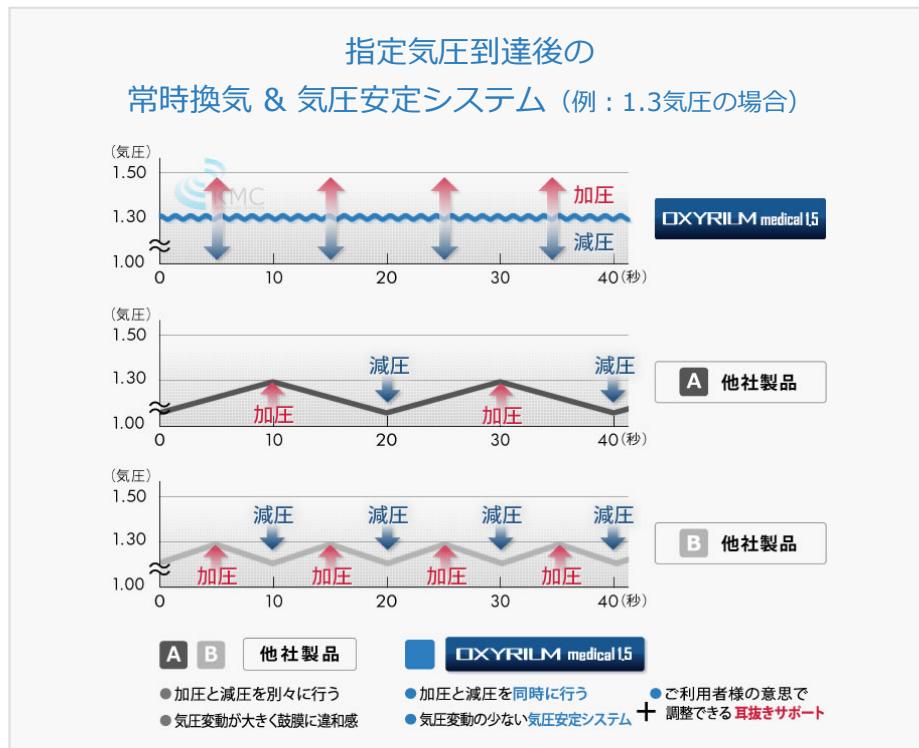

## W換気で最大換気率キープ

OXYRIUM Medical1.5は、カプセル内で人が吐き出す二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を含み圧縮された空気を排出し、新鮮な酸素を取り入れるため「W換気システム」を装備しています。

### ①常に作動している常時換気

スタートボタンを押すと常時換気が作動し、終了時まで排気・換気し続けます。

### ②指定気圧到達後に作動する換気

給気(加圧)と排気(減圧)を電子制御でコントロールし、最大排気量で換気します。


指定気圧到達後「①常時排気と②換気(電子制御)が作動し排気量が最大=換気率が最大」となるように、2つの換気システムで給排気をコントロールします。



加圧コンプレッサーからの給気口(送気口)を頭部下に配置し、対流経路を「頭部（給気）→足元（排気）」へスムーズな流れを造り出しています。

高気圧で圧縮された二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を含んだ空気を最大排気すると同時に、顔周りへ新鮮な酸素(O<sub>2</sub>)を最大給気し「CO<sub>2</sub>濃度上昇と気圧変動を抑えながら最大換気率をキープ」します。

カプセル内の利用者の頭部へ常に新鮮な酸素が供給され、顔周りを包み込むようスムーズに酸素を供給し、クリーンな高濃度酸素&高気圧環境を造り出します。

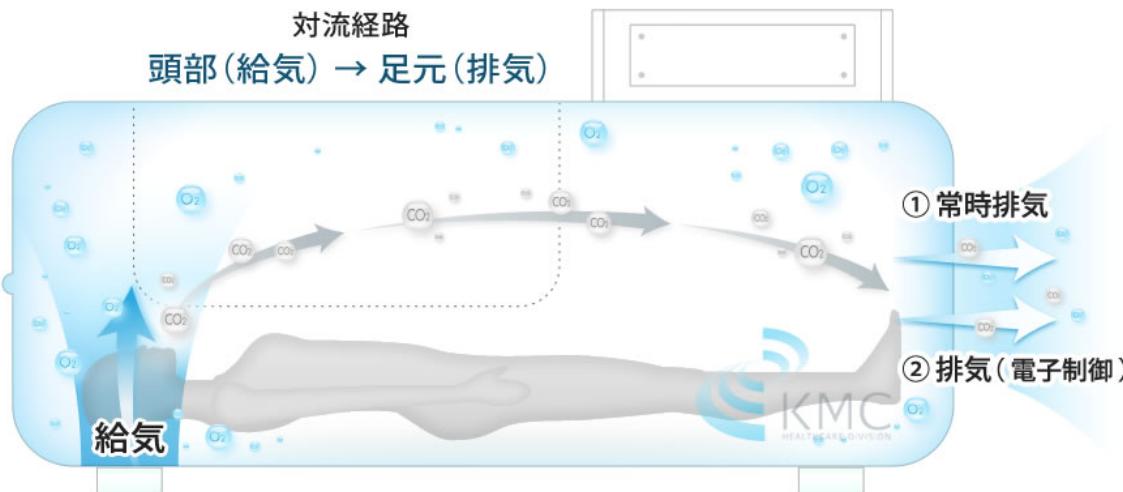

## OXYRIUM Medical1.5の特徴と他社製品との比較

### 継ぎ目が無く、ネジを使用しない 強化オールアルミ一体型構造

オールアルミ一体化によって従来品より耐久性・静音性に優れ、剛性約40%UP、メンテナンスフリーを可能にしました。カプセル本体の継ぎ目（ボルト留め）が無い為、歪み・ねじれ音・軋み音や工ア漏れの心配がありません。

#### 旧型・他社製品

##### 異素材を3分割ネジ留め※


※左右フタに異素材を使用したネジ留め分割成型



※画像は2007年モデルH2Oカプセル


#### OXYRIUM medical1.5

##### 【最新式】 一体型強化アルミ

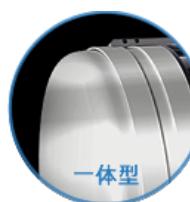

継ぎ目の無い強化アルミ袋形状の  
一体型により解決!

- 異音が無い
- 歪み、変形が無い
- メンテナンス不要

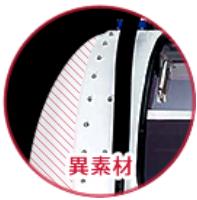

アクリル等の  
異素材3分割ねじ留め

- 加圧・減圧時の **軋み・異音**
- カプセルの **歪み、変形、劣化**
- メンテナンスが **必要**

旧型酸素カプセル利用者様の最も多かったご意見として

- カプセル内部に響く大きな歪み音・異音
- バキバキ、パリパリとカプセル内部に響く大きな音
- コンプレッサーの振動、圧縮音や排気音が響きうるさい

⇒ 「耳障り、爆発しそうで怖い・不安、急に大きな音が鳴り目が覚めてしまった、リラックス出来ない」等

異音については「**通わなくなつたきっかけ**」としてアンケートで上位のご意見です。主な原因は3つ

- ① カプセル本体が3分割でネジ留め・両端がアクリル等の異素材の組合せによる強度不足
- ② コンプレッサーそのものの静音対策が出来ていない
- ③ 給氣や排氣の静音対策です。


初めて酸素カプセルを利用する方は、人一人が横たわる密閉されたカプセルに入ることは不安です。

オキシリウムは、一体型強化アルミ構造でカプセル内部の異音や強度不足問題を解決し、

給排気やコンプレッサーも含めて徹底的に静音対策し「**中も外も静かな酸素カプセル**」にこだわり開発しました。

## Medical 1.5 は全てのパーツを 高耐圧構造に仕上げました

高加圧に耐えうる為に新開発の「高耐圧アクリルドア」を採用しました。また従来品と比べてカプセル本体に3倍以上厚みを持たせたMedical 1.5専用設計の「高耐圧重厚ボディ」です。※OXYRIUM、OXYRIUM Plusの約2倍の厚み

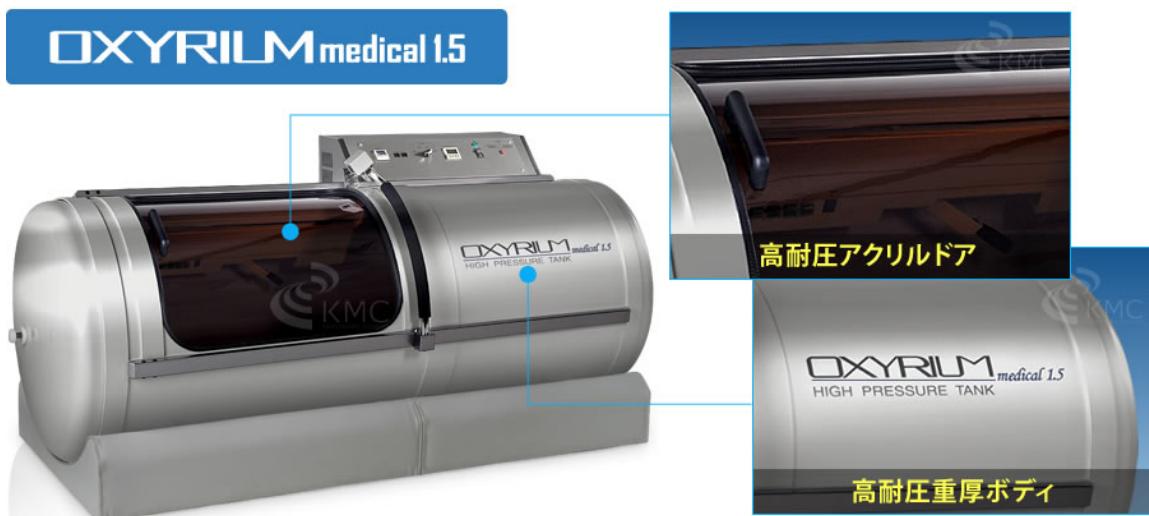

- **耐圧テスト** 1.5気圧～最大2.0気圧の高加圧・減圧を繰り返し、1600時間にも及ぶ耐圧テストに合格。

# OXYRIUM Medical1.5 各部仕様



## 1 一体型強化アルミボディー

静音性と耐久性に優れた強化アルミ袋形状の一体化。歪み・きしみを抑え、高耐圧対応の重厚なドアを採用し本体に従来品の3倍以上の耐久性を持たせました。

## 4 内部コントローラー

カプセル内からお一人様でも簡単に操作出来ます。左パネルにはインターフォン・耳抜きサポート・ON/OFF・オプションボタンを配置しました。稼働中の気圧設定変更も可能です。

## 2 メインコントローラー

コンパクト&スリムに設計。気圧・スピード・メモリ機能付きタイマー・ON/OFFを配置し、シンプルな直感的操作が可能です。

## 5 高性能デジタル気圧計

利用者様がカプセルの中から現在の気圧状況を一目で確認できる高性能デジタル気圧計。外からも確認できます。

## 3 大型スライドドア

出入りし易い大型の高気圧対応のクリアドアは内部の閉塞感を取り除き、使用時の安心感を追求しました。※  
画像はオプションのスモーケードア

## 6 カプセル内部

ゆったりと快適に過ごせるように内部コントローラーをドアと一体化。従来型より容積20%アップしました。消臭・除菌マットレスも標準装備。

# 電気用品安全法・PSEマーク取得

電気用品安全法（電安法）・PSEマークは、電化製品による火災や感電などから消費者を守るために施行された法律です。特定電気用品・電気用品は、適合性検査を受け証明書の交付を受けた後、電安法への適合を示す「PSEマーク」の貼付が義務付けられています。厳しい基準に合格し、各種安全規格の適合試験、認証をクリアし、公に安全性が認められた製品の証です。



JET TÜV



## 試験成績書 JET



試験成績書番号: 12TR-Y1\*\*\*

受付日及び受付番号: 平成24年 8月28日 (D12Y0380)

申請者(名称、住所): [Redacted]

製品名: 空気圧縮機

製品の型: HTB0975-144G1

製品の定格: 100V, 50/60Hz, 302/349W

適用規格: 電気用品の技術上の基準を定める省令  
〔昭和37年通商産業省令第85号：平成24年経済産業省令第5号（最終改正）〕 第1項 別表第八1及び2（53）

試験結果: 適合

平成25年 1月15日

一般財團法人 電気安全環境研究所 (JET)

横浜事業所長 初見 隆司



電気安全環境研究所 (JET)

試験成績書

TÜV SÜD Zacta Ltd. Yonezawa Testing Center  
4149-7 Hachimanpara 5-chome Yonezawa-shi Yamagata 992-1128 Japan  
Phone: +81-238-28-2880 Fax: +81-238-28-2888



## 電気用品安全法 適合検査成績書

試験成績書番号	Z091C-1 ***	Page 1 of 23
申請者	[Redacted]	
試験品	電気冷房機	
モデル	冷却器(SRH23YE)外機Assy	シリアル番号 733300600-1
申請受理番号	733300600	受理年月日 2013年06月06日
試験所	テュフズードザクタ株式会社 米沢試験所 〒992-1128 山形県米沢市八幡原 5-4149-7	
適用した技術基準	電気用品の技術上の基準を定める省令(昭和37年通商産業省令第85号) －平成24年1月13日 技術上の基準を定める省令一部改正 －平成24年1月13日 技術上の基準を定める省令の解釈一部改正 省令第1項別表第八1. 共通の事項, 2(42) 電気冷房機及び電気除湿機	
試験結果	試験品は上記基準に適合した。	

略語: OK, Pass or P = 適合 F or Fail = 不適合 N/A or N = 該当せず

この試験報告書は、上記試験品に対してのみ有效となります。  
当試験所の許可なしに、この報告書を複数複数することを禁止します。



テュフズード ジャパン

電気用品安全法 適合検査成績書

## 豊富なオプション

### カプセルカラー

ノーマル色ホワイト以外にも、ハイクオリティ志向に応えるオプションのカプセルカラーをラインナップ。 豊富なカラーバリエーションで設置場所やお好みに合わせてオプション選択可能です。

- ・ 全塗装：カプセル本体、コントローラー
- ・ ポイント塗装：サイドバー



オプション：シルバー



オプション：レッド



オプション：ベージュ



オプション：ブラック

※画像はオプションのスモーカードア。サイドバーはノーマルのシルバー

オプションカラーはカプセル本体とコントローラーのセットです。



ディープブルー



ダークレッド




チタニウム



ライトグリーン



ラベンダー

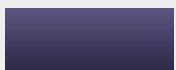

ダークパープル

## インテリアカラー

気圧の高い密閉されたカプセル内で使用する為「6有害物質不使用・AG抗菌・JABIA難燃・防汚・耐薬品機能」を備えた安心で安全な高機能性PVCレザーです。ツヤを抑えたマットで高級感のある仕上がりが特徴です。  
内装壁とマットレス全てレザー職人がハンドメイドで制作致します。

6 有害物質不使用

Ag<sup>銀</sup> Ag(銀)抗菌

JABIA 難燃

防汚

+ 耐薬品



オプション：ブラック



オプション：ベージュ



オプション：レッド



オプション：グリーン

※画像はオプションカラーのサイドバー。

インテリアカラーは、78種類の中からお選びいただけます。



Wホワイト



ライトグレー



ライトブラウン



ライトブルー



ブルーグリーン

## カプセルカラーとインテリアカラーのコーディネイト

(参考)

カプセル本体 / アイボリー・ホワイト サイドバー2本 / ライトブルー インテリア・マットレス / グレー  
カプセル内部パネル / アイボリー・ホワイト




## 最大気圧1.6気圧(<1.7気圧)hyperbaric oxygen chamber capsule



高出力コンプレッサー・ボディ強化パーツ・高吸排気システムを採用したMAX1.6気圧(<1.7気圧)ハイパフォーマンス仕様です。  
カプセル本体の剛性をアップし気圧安定性の向上と静穏性も実現しています。  
※プロ専用としてユーザーが限定されています。詳細はお問合せ下さい。

## 高性能クーラー・エアコン

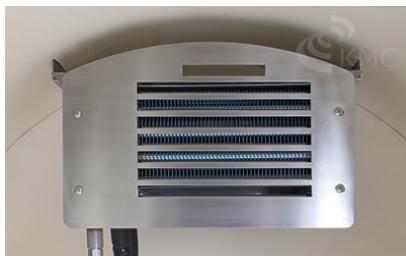

酸素カプセル専用として開発された除湿能力も兼ね備えた純国産のオート式高性能クーラーは、室内設置が可能な室外機とセットです。マイナス10℃を目指した「冷凍ユニットシステム」で、連続運転時や猛暑でもカプセル内を快適に保ちます。電気安全法への適合を示す「PSEマーク」取得製品です。

## 高性能酸素濃縮器・酸素発生器



酸素濃度50%・90%大流量の高性能酸素濃縮器です。オキシリウムのカプセル内の酸素濃度は高濃度ですが、更にカプセル内の濃度を高め高濃度酸素の吸入が可能です。全身を酸素で包み込む「酸素加圧方式」と口元で酸素を直接吸入する「口元吸入方式」が選択できます。

## スモークドア



外部の視線を遮り、プライバシーに優れた加圧空間を演出します。OXYRIUM Medical 1.5の快適性をより高め、デザイン面でも引き締まった印象を与えます。

## DVD・ワンセグ



ワンセグチューナー内蔵のD V D・スピーカー。その他クーラー・温熱マット・本体カラー・スモークドア・バイプレーション等のリラクゼーション機能など、ご要望に応じてカスタマイズが可能です。

## 体成分分析器



腰痛や膝痛の原因である肥満や筋肉の退化などの解決すべき課題を把握し施術計画や目標を策定し、経過を観察する為のモニター機器です。メタボ対策・特定健診・保健指導として患者様とのコミュニケーションツールとして活用できます。

## 交流磁気・電気磁気治療器



交流磁気治療器は強力な磁気パワーで「コリや血行の改善に効果がある」と認められた管理医療機器です。代替医療として様々な治療効果が発表されています。酸素カプセル内で簡単にご利用いただけます。

## ラドンガス発生器



天然ラドン温泉で有名なホルミシス効果。細胞を刺激して活性化させるラドンガス発生器です。

「高加圧+酸素+ラドンガス吸入」の相乗効果が期待できます。代替医療として様々な治療効果が発表されている話題の機器です。



オプションのラドン発生器（ラドンR-3）使用イメージ

## 搬入に関しての注意点

搬入間口は基本78cm以上必要です。ベランダからやドアを外す等、状況により搬入可能な場合もございます。搬入経路は無料で現地をご確認致しますのでお気軽にご相談ください。また、納品時に専門スタッフが使用方法・注意事項等を丁寧にご説明致します。




## OXYRIUM Medical 1.5 仕様



<b>カプセル材質等</b>	アルミニウム、袋形状の全溶接仕上げ一体化（高圧仕様）
<b>カプセル寸法</b>	210（横）×76（奥行き）×80（高さ）cm
<b>カプセル容積</b>	900リットル
<b>カプセル重量</b>	99kg
<b>制御装置寸法</b>	65（横）×12（奥行き）×94（高さ）cm
<b>制御装置重量</b>	30kg
<b>電源</b>	AC100V 50/60Hz 消費電力：602W
<b>加圧ポンプ寸法</b>	22（横）×37（奥行き）×37（高さ）cm
<b>加圧制御</b>	電磁弁制御
<b>安全装置</b>	安全弁・手動排気弁・停電時開放式
<b>気圧設定</b>	1.2気圧、1.3気圧、1.4気圧、1.5気圧（<1.6気圧調整）
<b>タイマー</b>	0～180分（1分単位）※999分まで設定変更可能（発注時）
<b>機能</b>	カプセル内2口コンセント（100V）、内外通話インターフォン、耳抜きサポート機能、常時換気&加圧減圧プログラム、タイマーメモリー機能、スピード調整、ドアクローズセンサー、酸素濃度UPシステム、5エアクリーン&消音システム、気圧安定システム、気圧上昇防止機能、気圧過昇リリーフバルブ、内外手動式強制排気弁、強制遮断装置
<b>メーカー希望小売価格</b>	4,730,000円(税込)

※本仕様は改良のため予告なく仕様変更する場合があります。

### 【寸法図】

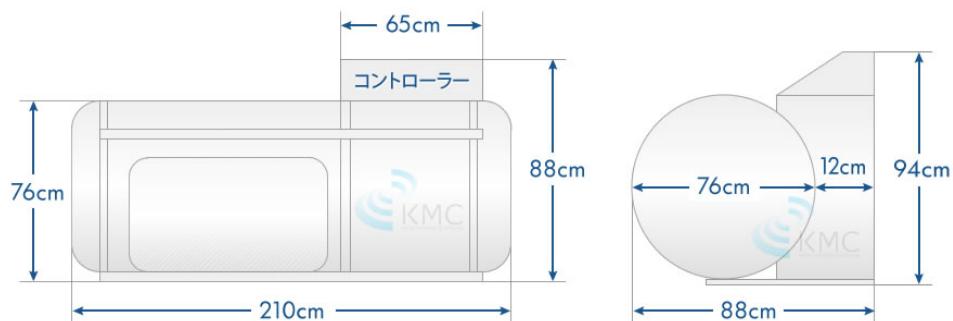

※オキシリウムメディカル1.5は医療機器ではありません ※搬入間口は基本78cm以上必要です。

※コントローラーは搬入後に組立て致します。

## 業態に応じた販促物

種類	サイズ	種類	サイズ
のぼり	W600×H1800	タペストリー	W800×H700～※サイズオーダー可
縦型バナー	W870×H2020	リーフレット	W105×H210※100枚単位
横断幕	W3000×H900	DVD	1.製品プロモーション 2.大気中の酸素欲張り活用術 3.酸素カプセル使用方法 合計3枚
ポスター	W515×H728		



ポスター

健康チェックシート



#### オーダータペストリー

①～④ 店舗名・キャッチフレーズ・料金・背景・画像の変更が可能です。

店舗様のイメージをヒアリングしオリジナルのタペストリーを制作いたします。

### 3つの無料WEB集客サポート

酸素カプセルを導入いただきましたお客様へ、問合せ・来客数増加が目的の無料サポートを行っております。新規のお客様は紹介やインターネットの口コミなどを通じて来店されることが非常に多くなります。

Googleから優良認定されたWEB事業部が無料で店舗様を継続的にサポート致します。



[WEB事業部HP](#)

<https://web-kmc.jp/>



## 導入店舗紹介

インタビュー形式で専用ページを作成しWEB上で『From現場の声』『導入事例』『PICK UP!』としてオーナー様や店舗様のメニュー・特徴等をご紹介致します。また、二次利用可能な取材記事ページを印刷可能なPDF作成しご提供いたします。



## SNSの支援

Facebook・instagram・Twitter・Google+・Line@・アメブロ等、お客様のSNSアカウントを拡散フォロー支援いたします。

また、店舗様のホームページも集客に繋がるよう継続的に拡散・宣伝いたします。



## ニュース配信

導入事例を元に、ニュース配信用の記事を作成し、7,300社以上のメディアに配信致します。



## オキシリウムメディカル1.5 Q & A 良くあるご質問

Q 搬入出来るか心配です。

A 搬入間口の最少幅は78cmです。完成時の最大幅88cmですが、本体とコントローラーは現地にてセッティング致します。間口が狭く搬入が難しい場合、スリム型OXYRIUM-SlimM1.5は搬入間口69cmをお勧めいたします。通常搬入が出来ない場合でもクレーン（ユニック）を利用し窓や屋上からの搬入も可能です。搬入経路は無料で現地をご確認致します。

Q 日本製ですか？海外からの輸入品ではないですか？

A 純日本製MADE IN JAPANです。オキシリウムシリーズは純日本製の製品製造を貫き通すことを方針としております。一部の酸素カプセルメーカーが販売している海外より輸入し最終工程が国内工場の日本製ではありません。弊社は、日本人特有の完璧を求める几帳面さと容易に真似の出来ない技術や製品に価値があると考えています。日本製の信頼と安心感を裏切らない「純国産の酸素カプセル」を高品質、低価格でお届け致します。

Q 1人でも使用できますか？

A 1人でも簡単に使用出来ます。コントローラーの電源ボタンを押しタイマーをセット。そのままカプセル内に入りドアを閉め、スタートボタンを押すだけです。メモリ機能付きタイマーですので、次回からは電源ボタンを押しドアを閉め、スタートボタンを押すだけの簡単操作です。  
またカプセル内のコントローラーからも気圧変更・ON・OFFやオプション操作も可能です。

Q OXYRIUM（オキシリウム）シリーズ各製品の違いを教えてください。

A OXYRIUMシリーズは、全てハード型で一体型アルミボディの高気圧・高濃度・酸素カプセルです。

OXYRIUM（オキシリウム）は、低価格・高品質・省エネ（ECO）・静音性を実現した一体型アルミボディ酸素カプセルのエントリーモデルです。気圧性能は、定番の1.3気圧（最大）強・中・弱制御装置と加圧ポンプを一体化したコンパクト&スリムコントローラーを採用し省スペースで設置可能です。

OXYRIUM-S（オキシリウムエス）は、OXYRIUMの基本性能はそのままにカプセル各部に強化・静音パーツを採用し気圧性能と剛性をUP。高気圧＆高耐久を実現した新基準1.35気圧（最大）の業務用対応モデルです。個人様のご使用もおすすめ致します。

OXYRIUM-medical1.5（オキシリウムメディカル）は、鍼灸整骨院・医療機関・プロフェッショナルユーザーの声を反映し開発した1.5気圧（<1.6気圧）のプロ用ハイスペックモデルです。メディカル専用の高耐圧設計でカプセル一体型コントローラーや耳抜き機能等、充実した装備を誇ります。

OXYRIUM-medical1.6（オキシリウムメディカル）は、メディカル1.5を更に圧倒的な高気圧1.6気圧（<1.7気圧）に仕上げた特注オーダー製品です。パフォーマンスを重視し特別なチューニングを施し充実した装備を誇ります。ユーザーが限定されています。詳細はお問合せ下さい。

OXYRIUM-slim（オキシリウム スリム）は、OXYRIUMの基本性能はそのままにカプセル幅68cmを実現した業界最小のスリム＆コンパクトな酸素カプセル。一般的なマンションドアへ搬入可能で狭い搬入経路や設置スペースの厳しい場所にも対応可能です。

OXYRIUM-slim-S（オキシリウム スリムエス）は、OXYRIUM-slimのカプセル各部に強化・静音パーツを採用し気圧性能と剛性をUP。高気圧＆高耐久を実現した新基準1.35気圧（最大）の業務用対応モデルです。個人様のご使用もおすすめ致します。

OXYRIUM-slim-M1.5（オキシリウム スリムメディカル）は、鍼灸整骨院・医療機関・プロフェッショナルユーザーの声を反映しメディカル専用の高耐圧設計で開発した1.5気圧（<1.6気圧）のプロ用ハイスペックモデルです。

OXYRIUM-slim-M1.6（オキシリウムメディカル）は、メディカル1.5を更に圧倒的な高気圧1.6気圧（<1.7気圧）に仕上げた特注オーダー製品です。パフォーマンスを重視し特別なチューニングを施し充実した装備を誇ります。ユーザーが限定されています。詳細はお問合せ下さい。

OXYROOM（オキシルーム）は、フルリクライニングが可能なルームタイプの酸素カプセルです。容積はOXYRIUMの約2倍となり主に足腰の怪我等で酸素カプセルへの出入りが困難な方を対象に開発。お一人でリクライニングチェアで寝ぐ、フラットに寝る。床に寝る・座るや多目的にお二人まで利用可能です。



◆比較表は左右にスライドさせてご覧ください。

OXYRIUM シリーズ モデル比較									
製品名	OXYRIUM	OXYRIUM-S	OXYRIUM medical	OXYRIUM medica1.6	OXYRIUM slim	OXYRIUM slim-S	OXYRIUM slim-M1.5	OXYRIUM slim-M1.6	OXYROOM
特徴	エントリーモデル	業務ユース対応モデル	プロ専用・ハイ入気量モデル	特注品・ハイ入気量モデル	エントリーモデル	業務ユース対応モデル	プロ専用・ハイ入気量モデル	特注品・ハイ入気量モデル	業務ユース対応モデル
最高気圧(最大)	1.3気圧(<1.5)	1.35気圧(<1.4)	1.5気圧(<1.6)	1.6気圧(<1.7)	1.3気圧(<1.5)	1.35気圧(<1.4)	1.5気圧(<1.6)	1.6気圧(<1.7)	1.35気圧(<1.4)
騒音レベル	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台	40dB台
コントローラー	スリム別置き	スリム別置き	カプセル一体型	カプセル一体型	スリム別置き	スリム別置き	スリム別置き	スリム別置き	縦型別置き
コントローラーサイズ	22×54×50cm	22×54×50cm	下記参照	下記参照	22×54×50cm	22×54×50cm	22×54×50cm	22×54×50cm	47×80×132cm
カプセルサイズ	210×76×80cm 注1: 210×88×94	210×76×80cm 注1: 210×88×94	210×76×80cm 注1: 210×88×94	205×68×71cm	205×68×71cm	205×68×71cm	205×68×71cm	2260×835×1580cm	
電源・電力	AC100V 370W	AC100V 370W	AC100V 602W	AC100V 602W	AC100V 370W	AC100V 370W	AC100V 602W	AC100V 602W	AC100V 760W
本体重量	約90kg	約90kg	98Kg	100Kg	約85kg	約85kg	約86kg	約87kg	約420kg
希望小売価格(税込)	2,200,000円 →特別卸価格 110万~	3,520,000円 →お問合せ下さい	4,730,000円 →お問合せ下さい	5,500,000円 →お問合せ下さい	2,560,000円 →特別卸価格 128万~	3,740,000円 →お問合せ下さい	4,950,000円 →お問合せ下さい	5,500,000円 →お問合せ下さい	4,968,000円 →お問合せ下さい

注1:一体型コントローラーを含めた場合のカプセル本体サイズ。

#### Q 酸素カプセルの内部気圧を1.6気圧以上に上げることはできますか？

A OXYRIUM Medical1.5と1.6 Medicalは耐圧テスト最大2.0気圧の高加圧・減圧を繰り返し、1600時間にも及ぶ耐圧テストに合格している製品です。酸素カプセルの基本原理「溶解型酸素は気圧に比例して増える」となりますが、「1.5気圧以上は活性酸素・酸素毒性が過剰に產生することが指摘されており、2.0気圧に近づくと様々な副作用・リスクが高まります。弊社の酸素カプセルは最大気圧を健康機器としての安全気圧1.3気圧～1.5気圧(1.6気圧未満)で設定」しています。

2.0気圧以上は高度管理医療機器である高気圧酸素酸素療法(HBO、Hyperbaric oxygen therapy)の医療領域となり利用目的が全く異なります。

【高気圧酸素酸素療法・HBO治療適応者】(注)酸素カプセルの効果とは異なります。

#### (全身性低酸素症～局所性低酸素症)

脳梗塞、脳塞栓、急性脳浮腫、心筋梗塞、網膜動脈閉塞症、突発性難聴、挫滅創  
一酸化炭素中毒、大量出血および出血性ショック、心筋梗塞、末梢動脈閉塞疾患、熱傷、凍傷  
空気塞栓、減圧症、麻痺性イレウス(腸閉塞)、脳血栓等

#### (溶解酸素と圧力の物理的効果)

空気塞栓、減圧症、麻痺性イレウス(腸閉塞)、脳血栓

#### (酸素の毒性を逆用する効果)

破傷風などの嫌気性菌感染症、ガス壊疽、悪性腫瘍など

【高気圧酸素療法・HBOによる副作用・リスク】(注)酸素カプセルの副作用・リスクとは異なります。

#### 【気圧障害】

##### (副鼻腔障害)

慢性副鼻腔炎による洞口狭窄、急性鼻炎、感冒などによる腔内と外界に圧力差を生じ疼痛、鼻出血などを起こす

##### (歯痛)

生活歯において歯冠もしくは充填物と歯の隙間が存在する場合に生じる

##### (肺損傷)

減圧中の呼吸停止などにより肺胞内圧が外界圧より高くなつたときに起こることがある

##### 【酸素中毒】

めまい、恶心、呼吸困難、痙攣など

##### 【減圧症】(急性かつ過大な減圧によって起こる)

関節痛、筋肉痛、胸痛など

このように2.0気圧以上の高気圧酸素療法・HBOと酸素カプセルとでは目的が全く異なり、基本原理は同じですが似て非なるものです。「内部気圧の高い方が効果的と言われるのは、人間も動物も同じで安全気圧の1.1気圧～1.5気圧(1.6気圧未満)」のことです。

安全性を無視し酸素カプセルや酸素ルームの気圧を「1.8気圧、1.9気圧と高気圧酸素療法・HBOの2.0気圧に近づけることはリスク」でしかありません。

機器選択の際は、極端な高気圧をアピールして宣伝販売している販売会社やメーカーには十分にご注意ください。

**Q 稼働時の騒音が心配です。他社製品とどこが違いますか？**

**A** 騒音を感じるのは大きく分けて「カプセルの外で聞こえる音」と「利用者様がカプセル内で聞こえる音」の2つです。OXYRIUMシリーズは酸素カプセルの外も中も静かな静音モデルです。うるさいと感じる騒音の主な発生源は4箇所です。

①加圧ポンプ稼働音（ファンや振動含む）

②送気（口）音

③排気（口）音

④加圧減圧時のカプセル本体の異音

他社製品は、加圧ポンプとカプセルを送気ホースで直結し送気口や排気口に簡易的なエアーフィルターを付けています。このエアーフィルターの本来の目的は塵埃などを取り除くことで消音目的では無いのですが、取り付けることにより多少は騒音が緩和される為「消音フィルター付き」と称して販売されています。加圧ポンプのケースも板金屋にポンプのカバーとして制作依頼している事が多く、建てつけが悪く隙間があると共振による騒音源となります。

他社製品のメンテナンスや静音化の依頼も多く、隙間を塞ぐ防振樹脂やネジに噛ませる防振ワッシャー・内部に防振シート・冷却ファン交換等である程度は静かになります。しかし、それは騒音原因の一つ加圧ポンプが静かになっただけで酸素カプセルとしては静かになった訳ではありません。

気圧が上がれば外部の音は聞こえ難くなる為、指定気圧に到達すればカプセル内はある程度静かに感じますが、カプセルの外ではコンプレッサーの加圧ポンプの音と振動、そして送・排気音と重なり「騒音」となります。酸素カプセルのノイズは複数の発生源があります。トータルとして低く抑えられないと結果として「うるさい」と感じます。

OXYRIUMは、以下①～④全てを徹底的に静音対策を施しております。

**①加圧ポンプ稼働音（ファンや振動含む）対策**

加圧ポンプの「騒音原因」として重要なのは、ケースの密閉性・素材・消費電力・冷却ファンのサイズ・冷却ファンの回転数です。新設計コンパクト&スリムなポンプ内蔵型コントローラーは、放熱性に優れたアルミケースで各部に防音・振動対策を施しノイズの吸収率と密閉率を向上させています。オリジナル加圧ポンプは1500Wクラスのパワフルさはそのままに省電力部品を用意し消費電力を抑えました。発生する熱も少ないため、冷却ファンの回転数が下がり静音性に優れ、流量を抑えることで排気音も抑えます。また、大型ファンは低回転でも冷却能力を高く冷却性能・静音性どちらにも効果が高いことから静音性に優れた大型冷却ファンを採用して、低騒音・低振動・コンパクト化を実現しました。

**②送気(口)音 ③排気(口)音の対策**

自動車製造工学を最大限に応用した「消音マフラー構造」で送気(給気)口と排気口を徹底的に静音化。更に給気ホースを直結せず、ポンプとカプセル本体の間に車の消音マフラーと同様の原理で開発した「給排気消音マフラーシステム」を採用しました。給気・排気の騒音を解決し「約40dBクラスの静寂な高気圧空間」を実現しています。（カプセル内外の静音対策）

**④加圧減圧時のカプセル本体の異音対策**

カプセル本体の継ぎ目（ボルト留め）が無いオールアルミニ一体化設計により、歪み・ねじれ音・軋み音等の加圧減圧時にカプセル内で響く突発的な異音問題を解決しました。（カプセル内の静音対策）

OXYRIUMは、圧倒的な静音性と省エネ性で快適な高気圧環境をご提供いたします。

**Q クーラー・エアコンは必ず必要ですか？**

**A** 必ず必要ではありませんが、OXYRIUMをより快適にご利用いただけます。

酸素カプセルは気圧を上げる（加圧）ことでカプセル内の温度が上がり、利用者の体温・体感温度も上がります。そして、連続運転により加圧装置も熱を持ち徐々に温度が上がります。

最新型のオキシリウムシリーズは従来型の酸素カプセルと違い消費電力を抑え発生する熱も少なく、放熱性の高いオールアルミニ設計で温度上昇を可能な限り抑え、カプセル本体や加圧装置に熱が溜まらない放熱設計ですが、「[不特定多数の方が連続利用される業務用ユース](#)」の場合は、オプションのクーラー・エアコンのご利用をお勧めいたします。

で、専用設計の「[冷凍ユニットシステム](#)」を採用し純国産オート式高性能クーラーは、サーモ機能付きで温度を自動感知し設定した温度を保ちます。また、余裕の大流量で従来型クーラーでは対応できなかった夏場の猛暑対策にも最適です。

**Q 他社のクーラー・冷風器との違いは何ですか？また流用品ですか？**

**A** アンケート結果では、一般流通している酸素カプセルの最も多い空調に関しての不満は「[冷えない](#)」です。高加圧環境の酸素カプセルにホースを接続し冷風を供給する方法では「[冷やすこと](#)」は不可能です。

温度の上がった酸素カプセル内にいくらホースで冷風を送り込んでも、多少緩和される程度です。

また、酸素カプセル専用クーラー・エアコンと称して販売されていても、実際には既存品を流用しカプセルへ接続しているだけの場合が多く、容量・パワーが足りず満足する「[冷え](#)」は得られません。

高加圧対応設計のクーラーは流通しておりませんので、流用品は内部の温度が上がり蒸し暑くなったり、水漏れ等の報告が多数ございます。

また、一時的な利用を目的とした「[キャンピング用の簡易クーラー改造品](#)」（注1）を取付けて販売している製品もございますのでご注意ください。

OXYRIUM専用クーラーは、「[冷凍ユニットシステム](#)」を採用した除湿能力も兼ね備えた高加圧対応の完全オリジナル専用設計で流用品ではありません。カプセル内を冷やして熱を外部へ放出する「[熱交換](#)」をしていますので、夏場の猛暑時にも余裕の性能で対応出来ます。日本で開発製造した高加圧対応のOXYRIUM専用設計で、「[安全の日本電気安全法 PSEマーク](#)」（注2）取得製品です。

酸素カプセルのクーラーも電安法への適合を示す「PSEマーク」の貼付が義務付けられています。

PSEマーク未取得のクーラーにはご注意ください。

**（注1）「キャンピング用の簡易クーラー改造品」**

車内での寝泊り時にエンジンを切って12vシガーエンジン電源を利用して利用するのが基本で、キャンプ等の一時的な利用を目的とした簡易式クーラーを100V改造したもの。排熱ダクトや発生した熱を室内にそのまま排出する為、騒音（約65デシベル）や部屋が暑くなってしまうことも。あくまでも簡易クーラーなの

で一時的な連続運転は問題無いですが、業務用ユースとして高加圧環境へ接続し不特定多数の方が毎日連続利用しON・OFFを繰り返す状況での耐久性設計ではない。

#### (注2) 「PSEマーク」

「電気用品安全法・PSEマーク」電気用品安全法は、電気製品が原因の火災や感電などから消費者を守るために施行された法律で、PSEは、Product Safety Electrical appliance & materials の頭文字です。

PSEマークは、日本国内で100Vコンセントに接続して使用されるほとんど全ての電気製品が対象となる日本の安全規格で厳しい基準に合格し、各種安全規格の適合試験、認証をクリアし、公に安全性が認められた製品の証です。

#### Q カプセルの中は、高い山に登った時と同じ状態ですか？高山病にならないか不安です。

A いいえ、その逆になります。高い所に行くと、気圧が下がる「低気圧」状態になり空気（酸素）が薄くなります。酸素カプセルの中は、地上より下で水深約3m（1.3気圧の場合）で横たわる時と同等の圧力が全身均一にかかる「高気圧」状態です。  
高山病は、低気圧による酸素不足で頭痛がするのです。その他、雨や台風、航空機に乗った時等も低気圧状態となり、気圧に敏感な方は、いわゆる「気象病」で体調に影響が出る人も多いらっしゃいます。「低気圧」状態の応急処置として、気圧を高めて改善する高圧療法は以前からあり、その原理を応用して商品化されたものが高気圧酸素カプセルですので心配ございません。

#### Q 他社からクーラーはガスが漏れると大変危険で安全の為に販売しないと聞きました。

A 自動車にエアコン装備が当然の今日、技術は日進月歩です。OXYRIUMシリーズのエアコンは専用設計で本格的な冷却触媒採用の高性能モデルです。カプセル内部の経路には柔軟性と耐腐食性に優れた高純度銅製配管の「シームレス構造」<sup>(注)</sup>を採用し安全を担保しています。  
万一の際にも内部に冷却触媒が漏れる心配はありません。自動車製造工学を最大限に応用し日本電気用品安全法（PSEマーク）審査を受け、酸素カプセル専用エアコンとしては唯一の国内製品ですので安全にご利用いただけます。抵抗のない生活気圧のクーラーと全く違い、高気圧状態=抵抗の大きいカプセル内の空調システムは特殊で専用の開発が必要であり、開発に際して技術・時間・費用がかかります。  
また、日本の法律で製造販売会社に義務付けられている日本電気安全法 PSEマークの審査・取得にもより多くの技術・時間・費用が必要です。  
他業者様はクーラーが販売出来ない理由を単に「危険」だと説明しますが「クーラーを危険防止の為に販売しないのでは無く、安全なクーラーを開発出来ない」と思われます。

PSEマーク未承認の高気圧未対応エアコンや冷風機には十分にご注意ください。

#### (注) 「シームレス構造」

純度の高い銅製の配管は、腐食に強く柔軟性にも優れます。冷却触媒を人体と完全隔離した構造で、継ぎ目のない肉厚な銅パイプを1本のパイプで高気圧環境下の酸素カプセル内部を安全に通過させます。

#### Q こちらのカプセルではないのですがエアコンの取り付けは可能ですか？

A OXYRIUM専用設計となりますので、オキシリウムシリーズ以外の酸素カプセルへの取り付けは行っておりません。製品メーカーの倒産等でお困りの場合、メンテナンス対応致します。お気軽にご相談ください。

#### Q オプションの酸素発生器は必ず必要ですか？

A 必ず必要ではありませんが、推奨しています。OXYRIUMシリーズのカプセル内は、高気圧で酸素濃度・分圧が高くなりますのでオプションを付けずに利用されているユーザー様もいらっしゃいます。酸素発生器は、カプセル内の酸素濃度をより高濃度に高め、高濃度酸素で加圧し高濃度酸素吸入が可能です。

#### Q 外気供給や酸素はどこから出ていますか？

A 外気や酸素の供給出口は、利用者の頭の下辺りに配置しています。カプセル内で寝ている状態ですと、頭の上から常に「顔周りを包み込む」ように新鮮な空気と酸素を供給する設計です。  
排気口については足元に配置することにより頭部→足元の対流を作り自然な流れで給排気しています。  
もう一つの酸素吸入方法として酸素発生器から生成される酸素濃度93%の高濃度酸素を直接吸入する「口元吸入方式(マイク式又は鼻吸入)」も選択できます。



#### Q 二酸化炭素中毒にならないですか？

A 中毒というのは、体内の組織などと結合して起こります。一酸化炭素に比べて二酸化炭素は血液中のヘモグロビンと結合し難く、空気中の二酸化炭素濃度は約0.04%(400PPM)です。中毒症状として頭痛等の症状が出る濃度は「約4%(40,000PPM)～と約100倍」もの数値となり濃度の桁が違います。

二酸化炭素は毒性がありませんので「室内の酸素濃度低下による酸素欠乏症」の方が、人体への影響としては大変危険です。

二酸化炭素濃度は部屋の空気汚染の尺度として、ビル管理法の衛生基準値では推奨値1,000ppm、目標1,500ppm、許容値5,000ppm(作業場所の限界値1日8時間労働)です。

二酸化炭素濃度と酸素濃度は相関関係にあり、人が呼吸する換気率の悪い部屋(約1.0気圧)では、おのずと「二酸化炭素濃度が上がると同時に酸素濃度が下がる」ことになり、これら数値を超える濃度になると「換気量(酸素)が足りない」という事になります。

高気圧状態のカプセル内は酸素濃度・分圧が高く、換気率の悪い二酸化炭素が高く酸素濃度の低い部屋(約1.0気圧)とは環境が大きく異なります。

OXYRIUMシリーズは「常時排気システム」を装備し、二酸化炭素(CO<sub>2</sub>)を含んだ空気を排気すると同時に顔周りへ新鮮な酸素(O<sub>2</sub>)を給気し「CO<sub>2</sub>濃度上昇と気圧変動を抑えながら最大換気率をキープ」していますので、安心してご利用頂けます。

#### Q 耳抜き補助機能は付いていますか？

A 耳抜きサポート機能付きです。カプセル内部コントローラーに電動式の耳抜きサポートボタンがあります。耳抜きが上手く出来ない時にボタンを押すと一定時間減圧し耳抜きする前の気圧に戻します。耳抜きが上手く出来ない時にカプセル内部のサポートボタンを押してください。

#### Q カプセルの中で寝てしまっても大丈夫ですか？

A 全身が均一に加圧され酸素が行きわたることで、殆どの方が眠ってしまいます。また眠って頂く事でリラックス効果が得られ、酸素カプセルとの相乗効果により効果が期待できます。基本はワンセット1時間から1.5時間、週に2-3回です。

#### Q 業務用での利用は可能ですか？またお店のロゴは入れてくれますか？

A 可能です。不特定多数の方が利用する業務用ユースやプロ使用を前提として開発しています。  
ロゴ・セミオーダー可能です。その他どの様なことでもお気軽にご相談ください。

#### Q サイズ変更等の特注は可能ですか？その場合の納期は？

A 可能です。例えば、カプセルの全長を22cm延長したロングタイプのカプセルをご要望の場合、セミオーダー約3週間～となります。ご要望に応じた特注品製作は、スピーディーかつ低価格でお客様から高い評価をいただいている。ご希望の仕様やご使用の条件等、お気軽にご相談下さい。


#### Q 特注した場合の流れを教えてください。

##### 1. 無料相談・ヒアリング

電話またはメールにてお問い合わせください。担当者がご希望の仕様等をヒアリング。各種業態に応じたご提案。

##### 参考事例：特注オーダー

- カプセル内寸22.4cm延長・足元5.0cm拡張
- 出入り口スライド式ドアを左右反転加工

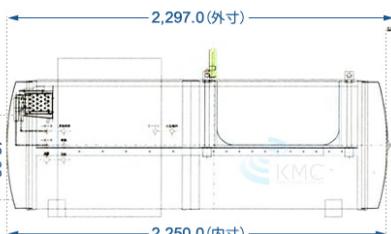

#### Q 車載対応や移動し易いような加工、気圧や酸素濃度の指定は可能ですか？

A 可能です。実際にオープンに情報公開していない特注・オーダー対応事例が多数ございます。  
車載用としてお車に合わせた固定土台や移動用キャスターの取り付け等、ニーズに合わせて作成いたします。  
まずはお客様のご要望をお知らせください。可能な限り対応致します。

#### Q 内部気圧をもっと高気圧に上げることは可能ですか？

A 可能です。特注で1.6気圧(1.7気圧未満調整)を対応しています。ご相談ください。

※酸素毒性を利用した医療用と違いOXYRIUM Medicalは、最大気圧を安全気圧1.5気圧(最大)で設定しています。「内部気圧が1.5気圧以上になると酸素毒性がみられる可能性が高くなり、特に1.75気圧を超えるとその頻度が増す」とのデータも発表されています。

#### Q 両端がアクリルの3分割ねじ止め式の方が高価で静かだと聞きました。

A 両端がアクリル（異素材）の酸素カプセルは2006年頃の旧設計ですので、現在では3分割ねじ止め式やカプセル本体の頭部と脚部がアクリル等の異素材で製造する方がコスト高になりますが、良い意味での高価ではありません。

加圧・減圧の過程で加圧時には内から外に向かって膨らむ力がかかり、3分割ねじ止め式やカプセル本体アルミニ+両端がアクリルの異素材を使用したカプセルでは繋ぎ目や異素材との境目から軋み等の異音発生率が高まります。

また、最大の問題点は、異素材との組み合わせによる耐久性能の低下です。

アルミニや鉄の同素材を使用した一体型でなければ最大1.3気圧程度が限界となります。

弊社は、ソフト式の酸素カプセルも開発販売しており、最新型は繋ぎ目のない一体型の袋状成型を国内で初めて成功しました。

ソフト式もハード式も基本理論は同じで、密な膨張率を計算し均一に圧が掛かるよう同素材を使用し強度の弱い部分を無くす「継ぎ目の無い一体型設計」が最も耐久性が高く静音性に優れています。

「継ぎはぎの風船をイメージ」して頂けましたら、アクリル等の異素材を組み合わせた継ぎ目のあるカプセルと、同素材で継ぎ目のない袋状一体型のカプセルと、比較するとどちらが耐久性も含めて優れているのかご理解いただけると思います。

#### Q 古い旧型のねじ止め式の酸素カプセルでも下取り・引取りしてくれますか？

**A** はい、対応致しております。 買い替え時の高額下取りサービスや50社以上のネットワークで高額買取り又は委託販売、大型機器の処分等についてもお気軽にご相談くださいませ。  
神戸メディケアの確かな目で、御社の資産をしっかりと評価させて頂きます。

**Q 減価償却(法定耐用年数)は何年ですか？**

**A** OXYRIUMシリーズの減価償却資産の法定耐用年数は5年となります。

**Q 助成金、補助金制度を利用できますか？**

**A** 皆様、設備機器購入として助成金、補助金や税制優遇制度を多数ご利用頂いております。  
申請に必要な見積書・仕様書・カタログ・製品に工業会の証明証発行等、採択に向けて全面的にご協力致します。

**(補助金・助成金)**

- 事業再構築補助金(中小企業等事業再構築促進事業)
- 中小企業経営強化税制・税制措置・生産性向上設備(A類型)
- 小規模事業者持続化補助金<一般型>
- 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>
- 被災小規模事業者再建事業 <持続化補助金>
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
- 被災小規模事業者再建事業

**(税制優遇制度)**

中小企業経営強化税制・税制措置・生産性向上設備(A類型)

※OXYRIUMシリーズは対象製品です。

**Q 現金・リース・レンタル以外の支払い方法は？**

**A** 個人・法人クレジットカード決済、商用クレジット（分割支払い）が可能です。また弊社は健康・医療・介護・美容関連のECサイトを多数運営しておりますので楽天・Yahoo・AMAZON・自社ECサイトで個人・法人クレジットカード決済や商用クレジット申込が可能です。  
その他、一部現金入金や本体とは別のオプション製品等は複数枚の領収書で発行いたします。  
個人事業主・法人様の決済方法はお気軽にご相談ください。

**Q 手書きの領収証は発行できますか？**

**A** 現金支払いの場合は発行可能です。 担当者へ領収書発行希望の旨・お宛名・但し書きの3点をご連絡ください。

**Q 性能・品質は問題ないですか？なぜ安いのですか？**

**A** 弊社とメーカーは、酸素カプセル製品の取扱いを20年以上、販売実績5,000台以上の経験と開発ノウハウがございます。そして酸素カプセルの不満・改善・ご要望の全てをフィードバックし、「性能・品質の限界を超える」考え方で日々努力を惜しまず改良・改善を積み重ね続けています。

OXYRIUM2023年モデルは「低価格・高品質・省エネ／ECO・省スペース・絶対静音」を目指し改良・開発した最新モデルとして性能・品質には絶対的な自信がございます。

価格に関しては、品質を向上させながら価格を抑える為にゼロから再設計を行い、国内一貫体制により徹底的に無駄なコストを排除しました。また、有名アスリートを起用した広告宣伝等の経費を抑え、中間業者・代理店を入れない販売形態で中間マージンが発生しないこともお安く出来る理由の一つです。

**OXYRIUMシリーズは、ユーザーの声を反映した最新型「純国産 高性能酸素カプセル」です。**

その中でもMedical1.5は、鍼灸接骨院・医療機関・プロフェッショナル専用機として開発したハイスペックモデルです。是非、こだわりの日本製 高気圧・酸素カプセル OXYRIUM Medical1.5をご検討くださいませ。

●鍼灸接骨院 ●医療機関 ●プロフェッショナル専用

**OXYRIUM** *medical 1.5*

酸素カプセル オキシリウム メディカル 1.5



純国産品

登録商標「OXYRIUM」・PL保険加入製品

※スマートドアはオプションです。

## ハイスペック1.5気圧 鍼灸接骨院・医療機関・プロフェッショナル専用

## 高気圧酸素カプセル「オキシリウム メディカル1.5」2023年モデル

【メーカー希望小売価格】**4,730,000 円(税込)** ▶ 割引き価格はお問合せ下さい。

※商用リース対応 月額リース料金はお問合せ下さい。 ※商用クレジット対応 月額はお問合せ下さい。

※搬入・運搬設置費用は別途、全国無料デモ対応致します。

### お問い合わせ

鍼灸接骨院・医療機関・プロフェッショナル専用「オキシリウム メディカル1.5」のお問合せは

(株)神戸メディケア東京銀座支店まで

 **0120-778-158** 受付時間：9時～18時（平日のみ）

• FAX : 03-3248-3425 (24時間受付)